

# BIOBASIC 210, 310, 410



## HOOFD KENMERKEN

De **BIOBASIC** lijn biedt kostenbesparende opslag van bio-materialen voor een groot aantal toepassingen.

Zonder koude achterwand. Met temperatuur-alarmen, intern en extern ATEX, en een gebruiksvriendelijke bediening, biedt de BIOBASIC lijn een uitzonderlijke selectie van kenmerken in een zeer klein pakket.

Met een keuze uit 3 maten is de BIOBASIC lijn geschikt voor gebruik in kleine ruimtes, waar prestatie, kenmerken en waarde van het grootste belang zijn.

# BIOBASIC 210, 310, 410

De BIOBASIC lijn is beschikbaar als koelkast of vrieskast in 125L, 218L of 346L modellen.



Technische gegevens	BIOBASIC RR			BIOBASIC RF		
	210 L	310 L	410 L	210 L	310 L	410 L
Temperatuurbereik	+2/+15°C			-25/-5°C		
Omgevings-temperatuur	10/35 °C (dichte deur)					
Besturing	Zeer gebruiksvriendelijke BIOBASIC besturing met akoestische/optische temperatuur- en deuralarmen, potentiaalvrij-contact en kalibratie functie.					
Inwendig/ Uitwendig	ABS/ Wit gelakt					
Afmetingen mm (BxDxH)	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876
Bruto inhoud Netto inhoud	125 liter 104 liter	218 liter 189 liter	346 liter 312 liter	125 liter 104 liter	218 liter 189 liter	346 liter 312 liter
Inclusief kunststof gecoate draad-roosters	2	3	5	2	3	5
Koudemiddel	R600a or R134a					
Energieverbruik	0,6 kWh/24h	0,6 kWh/24h	0,7 kWh/24h	1,1 kWh/24h	1,3 kWh/24h	1,6 kWh/24h
Geluidsniveau	36,5 dB(A)	35,1 dB(A)	36,8 dB(A)	39,7 dB(A)	39,9 dB(A)	38,6 dB(A)
Geplaatst op:	stelpoten/ wielset	stelpoten/ wielset	verstelbare poten	stelpoten/ wielset	stelpoten/ wielset	verstelbare poten
Luchtgeleiding	BioLine luchtgeleidingssysteem					
Ontdooiing	"smart defrost" met automatische ontdooiing en herverdamping dooiwater					



## Bovenpaneel met BIOBASIC besturing

De BIOBASIC besturing is speciaal ontwikkeld voor gebruikers van BIOBASIC. Enkele van de vele kenmerken zijn akoestisch deuralarm, hoge- en lage temperatuur alarmen, en potentiaalvrij-contact(NO/NC) voor externe alarmering. Deurslot standaard.




## Intern en extern ATEX

De BIOBASIC lijn voldoet geheel aan de ATEX eisen, zowel intern als extern, zonder extra kosten. BIOBASIC kasten voldoen aan EN/IEC 60079-15, elektrische apparaten voor gebruik in Categorie 3, zone 2 lokaties met mogelijk aanwezige explosieve atmosfeer. Hierdoor kunnen kasten in de directe werkomgeving geplaatst worden, in plaats van op een lokatie op afstand, ingeval de kast alleen inwendig aan de ATEX eisen zou voldoen.



## Prestatie is de standaard

Door een uitgekiend design en hoogwaardige componenten, biedt de BIOBASIC lijn een kostenbesparende prestatie op een zeer klein vloeroppervlak.

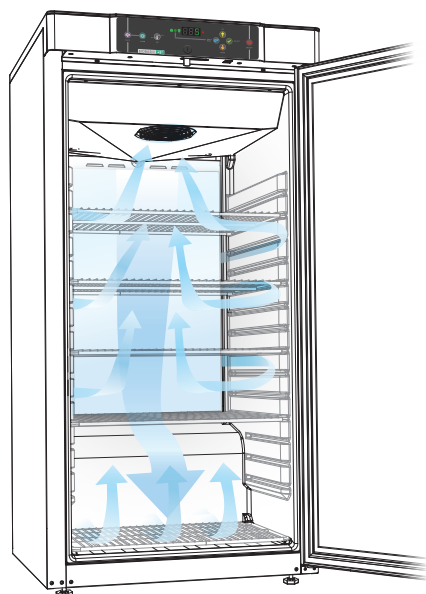

## LUCHTGELEIDING

Het unieke luchtgeleidingssysteem garandeert een stabiele en gelijkmatige koeling in de kast. Dankzij een lamellen verdampers bovenin, is er **geen koude achterwand** in de kast.